Modules pour gaz

Amico

Modules pour gaz personnalisés




Caractéristiques:


- Alternative économique d'ajout de nouveaux modules de gaz
- Permet de placer la distribution de gaz plus près du patient
- Élimine l'usure sur les modules de gaz
- Idéal pour tous les types de gaz
- Compatible avec toutes les sorties/ prises de gaz médical
- S'installe sur n'importe quel rail d'équipement ou pièce de montage
- Options de gaz double ou tripe pour accommoder plusieurs patients
- Plusieurs configurations possible pour répondre à tous les besoins
- Conforme à toutes les normes médicales

Les modules pour gaz Amico sont conçus pour fournir des prises spécifiques pouvant être connectées à une source à l'aide d'un tuyau, et sont une solution facile et efficace qui évite d'avoir à installer un système de distribution de gaz à la grandeur de l'établissement hospitalier.

Modules de gaz simple

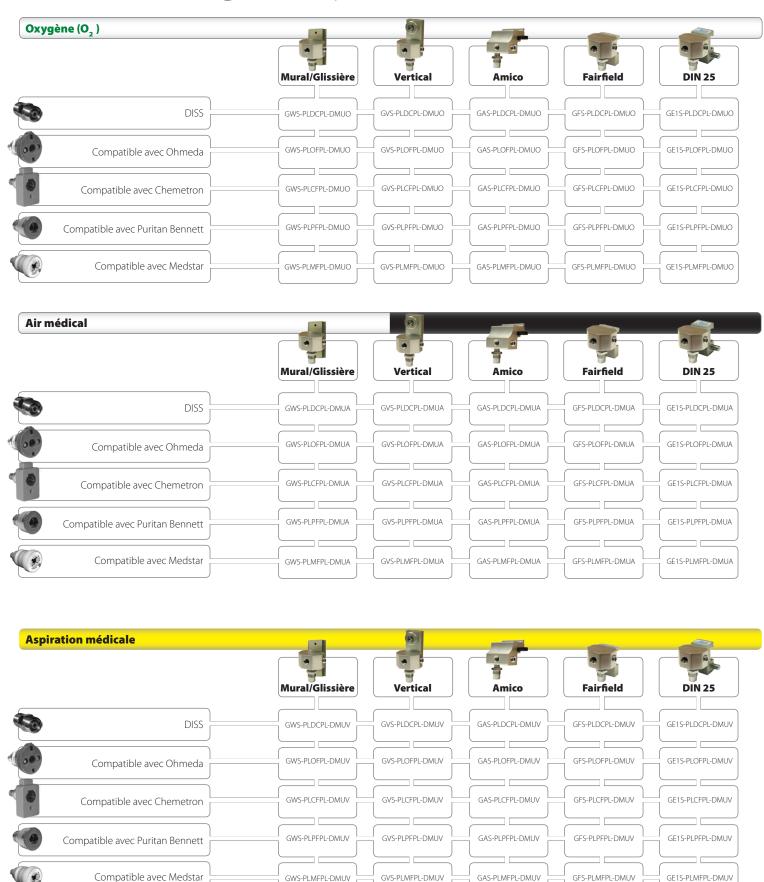

Modules de gaz double

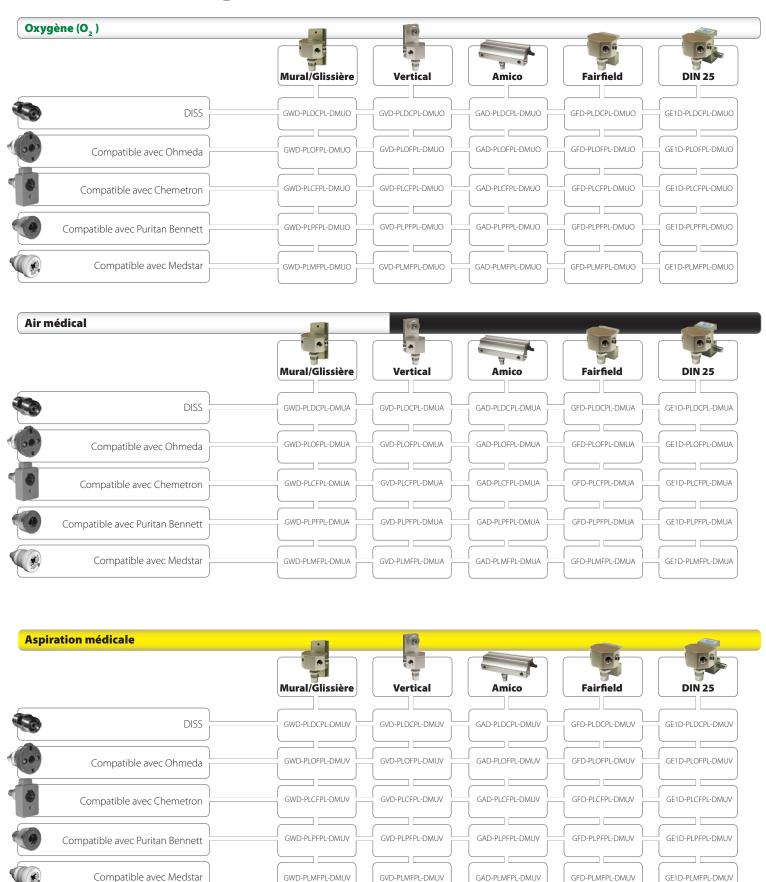

Modules de gaz triple

Compatible avec

Compatible avec

Puritan Bennett

Compatible avec

Oxequip/Medstar

Chemetron





GHZ-CF06-UO

GHZ-PF06-UO

GHZ-MF06-UO

GHZ-CF06-UA

GHZ-PF06-UA

GHZ-MF06-UA


GHZ-CF06-UV

GHZ-PF06-UV

GHZ-MF06-UV




*Les images démontrent les couleurs des standards américain. Les couleurs selon les configurations ISO, sont aussi disponible.

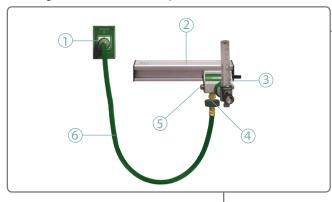

Déplacez une connexion de gaz

Déplacez une connexion médicale n'importe où


- Source de gaz médical
- 2 Rail de montage pour accessoire
- 3 Prise du module de gaz
- 4 Orifice d'entrée DISS au module de gaz
- (5) Bouchon d'extrémité
- 6 Tuyau

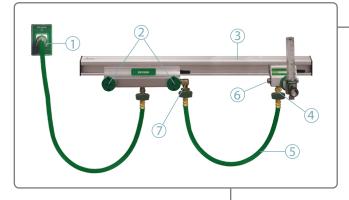

Prolongation de prises de sortie

Ajoutez de multiples connexions en utilisant une seule source


- Source de gaz médical
- 🥎 Prise de gaz du module de gaz
- 3 Rail de montage pour accessoire
- 4 Orifice d'entrée DISS au module de gaz
- ₍₅₎ Tuyau
- Bouchon d'extrémité
- Prise de sortie DISS (optionnelle sur tous les modules de gaz)

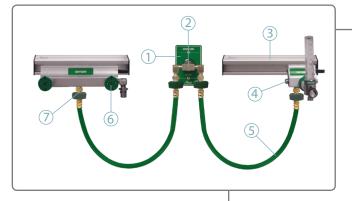

Doublez votre service

Connectez à une prise existante et fournissez deux endroits différents de la chambre

- 1) Source de gaz médical
- Connecteur en "Y"
- 3 Rail de montage pour accessoire
- 4 Bouchon d'extrémité
- (5) Tuyau
- 6 Sortie de gaz des connexions du module de gaz
- 7 Prise de sortie DISS au module de gaz

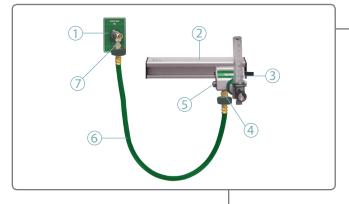

Pour en ajouter un de plus

Ajoutez de multiples modules de gaz tout en laissant fonctionner la prise existante

- 1) Source de gaz médical
- (2) Rail de montage pour accessoire
- 3 Sortie de gaz des connexions du module de gaz
- 4) Prise DISS au module de gaz
- 5 Bouchon d'extrémité
- 6 Tuyau
- Connecteur en "T"



Accessoires pour modules de gaz



Tuyau

Connecteur en "T"

- Pour connecter un module de gaz à un appareil source
- Fabriqué sur mesure



• Permet à la prise de gaz existante de continuer à fonctionner pendant l'ajout d'une seconde prise de gaz

Support à glissière





· Pour installer facilement le support en anneau à ventouse pour le réservoir




Permet de brancher à la source de gaz médical pour une double distribution de gaz





Grand choix de rails d'équipement concus pour l'installation de modules de gaz pour améliorer la productivité et l'organisation

- Réservoir jetable et réutilisable disponible
 - Support et réservoir vendus séparément
 - Choix de 1 200cc, 2 000cc et 3 000cc

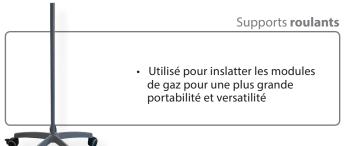



Débitmètre et régulateurs d'aspiration

• Gamme complète d'équipement de gaz secondaire disponible

Veuillez visiter www.amico.com pour plus d'information sur nos modules de gaz



Distribué par:

AA-GB-V1 IMPRIMÉ DÉC 12