

# Toma Para Consola – NFPA



## Características:

- El caudal excede los requisitos de NFPA y de CSA
- Acepta solo adaptadores DISS para el gas específico en uso
- Identificación clara para eliminar la posibilidad de intercambio de los servicios del gas
- Ajuste del espesor de la pared de hasta 1" (25 mm)
- Diseño de toma de gas 2 en 1
- Varias combinaciones usando Ohmeda and DISS connections

## Especificaciones:

La toma dual Amico combina dos conjuntos de válvula de cierre frontal, en un único diseño compacto. La toma de gas dual Amico ahorra espacio, reduce costos de construcción y garantiza al usuario la conexión correcta siempre.

Una placa de color de acuerdo al tipo de gas es utilizada en el exterior de la toma, para identificarse mas fácilmente y a su vez lograr una estética agradable.

La toma de gas doble sólo acepta adaptadores específicos correspondientes al gas y en la parte posterior tiene una clavija con pines que encajan respectivamente con la parte posterior de cada gas específico.

Todas las tomas se limpian y desengrasan para el servicio de gas médico, se ensamblan y prueban en la fabrica.

Las tomas están cumplen con las normas NFPA 99 y CSA Z7396.1.

Nota: La toma Dual Amico se recomienda utilizarse con un ID de 3/8" (9.5 mm) (nominal).

**Proyecto**

---




---



---

# Especificaciones Técnicas

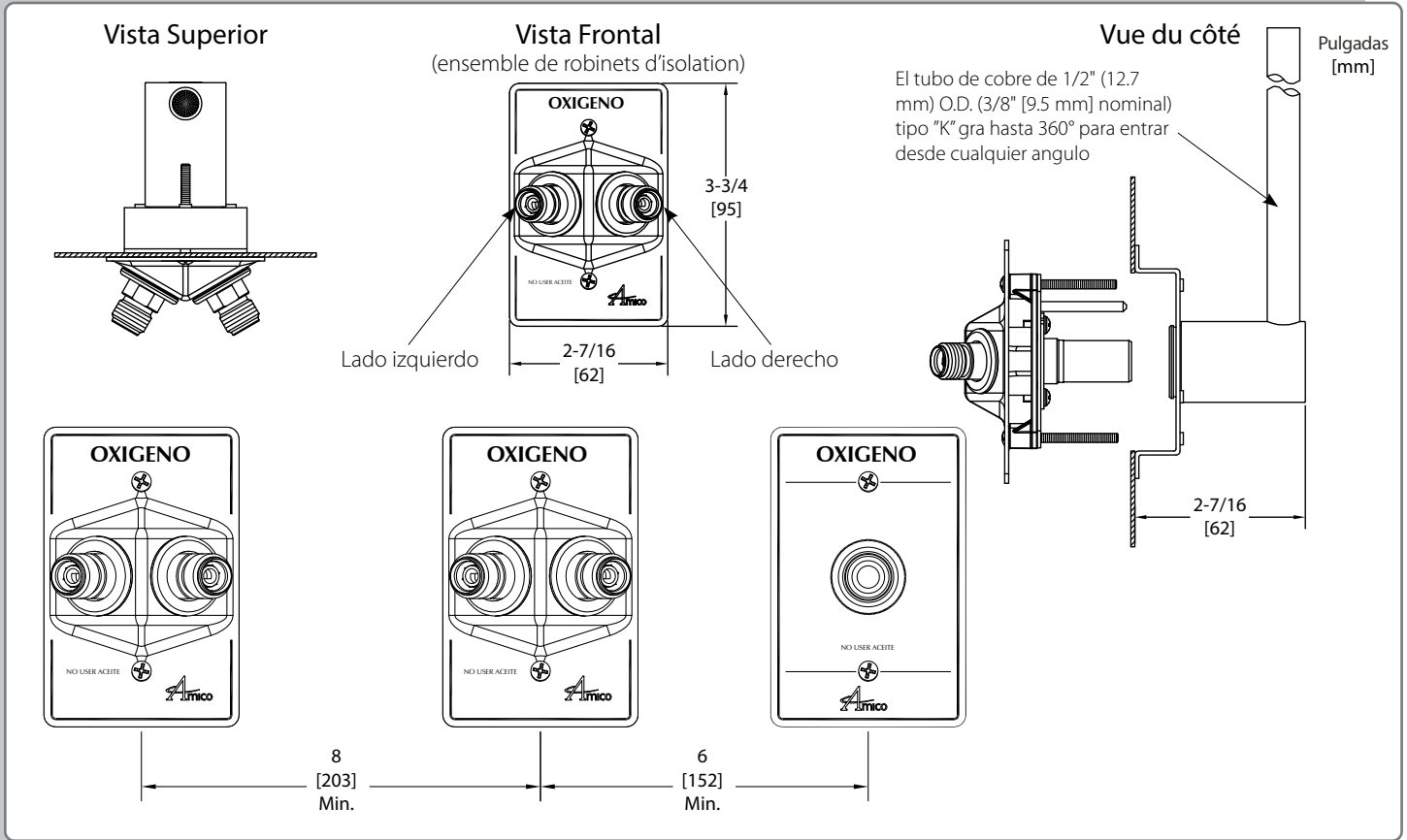

**La letra "X" define el Lado Izquierdo**  
**Opciones de Conexión:**

DISS	=	D
Ohmeda conexión	=	Q
Chemetron	=	C
Flujometro de 15 LPM estilo Thorpe*	=	T15
* Ofrecido solo en un lado		

## Números de los Modelos

**La letra "Y" define el Lado derecho**  
**Opciones de Conexión:**

DISS	=	D
Ohmeda conexión	=	Q
Chemetron	=	C
Flujometro de 15 LPM estilo Thorpe*	=	T15
* Ofrecido solo en un lado		

Toma Doble (solo frente):

Toma **O-DZZZ-XY-L-GAS**

**Las "ZZZ" Definen el Tipo:**

Amico Pin de Identificación Doble	=	FAC
Amico Pin de Identificación Simple	=	FPC

**La letra "L" define el idioma:**

Inglés (NFPA)	=	U
Español (NFPA)	=	SU

**Las letras "GAS" definen el tipo de Gas:**

Oxígeno	=	OXY
Aire Medicinal	=	AIR

QTY.1

**O-BAKCON-U-GAS**

(Parte posterior)

QTY.1

**O-TRIM-P275G**

(Marco)

Representado Por:

**NOTA:** El montaje y la moldura deben pedirse por separado.

Amico Corporation | 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada | 600 Prime Place, Hauppauge, NY 11788, USA  
Teléfono Gratuito: 1.877.462.6426 | Fax Número Gratuito: 1.866.440.4986 | Teléfono: 905.764.0800 | Fax: 905.764.0862